

RESPIRARE BENE IN OGNI MOMENTO

Prima di utilizzare i **Breathe Right®** Cerottini Nasali leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni chiedere al farmacista o al medico.

MIEUX RESPIRER, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de **Breathe Right®** Bandelletes Nasales. Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

JEDERZEIT UND ÜBERALL BESSER ATMEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie **Breathe Right®** Nasenstrips anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Breathe Right®

CEROTTINI NASALI BANDELETTE NASALES NASENSTRIPS Besser Atmen

1 Cosa sono e per cosa si usano i Breathe Right Cerottini Nasali?

Breathe Right Cerottini Nasali sono costituiti da strisce elastiche che si sollevano e allargano delicatamente i passaggi nasali consentendo un miglior flusso d'aria.

Breathe Right Cerottini Nasali, senza medicinali, aprono immediatamente i passaggi nasali favorendo la respirazione.

Breathe Right Cerottini Nasali possono essere utilizzati di giorno o di notte per alleviare la congestione nasale dovuta ad allergie o raffreddore.

Utilizzare se si soffre di:

• Congestione nasale

• **Breathe Right Cerottini Nasali**, quando applicati, aprono le narici e aiutano a respirare meglio fornendo sollievo da congestione nasale e naso chiuso che possono essere causati da raffreddare e allergie.

• **Breathe Right Cerottini Nasali**, quando applicati, possono fornire sollievo dai sintomi di congestione o difficoltà respiratoria dovuta al setto nasale deviato. Non devono essere considerati un'alternativa all'eventuale correzione chirurgica definitiva.

• Russamento

Consentendo una respirazione più facile attraverso il naso anziché la bocca, i **Breathe Right Cerottini Nasali** possono aiutare a ridurre o anche eliminare il russamento. Per ottenere migliori risultati è importante il russamento, si consiglia di usarli ogni notte.

Breathe Right Cerottini Nasali possono essere utilizzati anche in caso di assunzione contemporanea di medicinali.

2 Come usare i Breathe Right Cerottini Nasali

Usa e getta - usare ogni cerottino solo una volta. Manuato.

Possono essere utilizzati di giorno o di notte.

Una corretta applicazione garantisce un miglior risultato. Fare attenzione a non posizionare il cerottino troppo in alto o troppo in basso.

È importante utilizzare cerottini di misura adatta al proprio naso per ottenere un miglior risultato. I cerottini nasali piccoli/medi si adattano al 75% dei nasi, mentre quelli grandi sono destinati agli adulti con nasi più grandi.

Le speciali strisce elastiche si sollevano allargando delicatamente i passaggi nasali.



PULSICI
Lava e ossuga la pelle del naso per rimuovere sporco e grasso (usa un sapone per pulire la pelle grassa).

POSIZIONE
Rimuovi la pellicola protettiva e posiziona il cerottino sul naso.



RIMUOVI
Rimuovi il **Breathe Right Cerottino Nasale** mentre hai il viso con acqua calda o quando sei sotto la doccia. Rimuovi sempre lentamente il cerottino. Allenta le estremità, quindi solleva delicatamente il cerottino da entrambi i lati.

APPLICA
Premi delicatamente e stira il cerottino sulla pelle per fissarlo.

Un'appropriata rimozione dei cerottini, con acqua calda, riduce la probabilità di reazioni cutanee e lesioni.

CON I CEROTTINI NASALI AL MENTOLO

I cerottini nasali **Breathe Right® MENTOLO** sono rivestiti con capsule che contengono mentolo, eucalipto e canfora. Gratte la superficie del cerottino nasale per rilasciare il profumo lenitivo del mentolo - grattare il profumo per rinfrescarlo.

NON USARE

In caso di allergia ai **Breathe Right Cerottini Nasali**.

Attenzione: **Breathe Right Cerottini Nasali** non sono destinati al trattamento dell'apnea notturna. Le persone che presentano sintomi di apnea notturna devono consultare il proprio medico. Alcune persone possono manifestare reazioni avverse quando usano **Breathe Right Cerottini Nasali**. Queste possono essere reazioni in sede di applicazione (ad es. eritema, irritazione, dolore, infollamento, congestione, sanguinamento, cricca e alterazione del colore della pelle) e reazioni di sensibilità, tra cui prurito cutaneo, prurito e gonfiore facciale.

Se si presenta una reazione qualsiasi indolore grave correlata a questo prodotto al fabbricante e l'autorità nazionale competente nel tuo paese. È importante segnalare gli incidenti del prodotto in quanto ciò può aiutare a identificare eventuali difetti di questo dispositivo medico per impedire che incidenti simili si ripetano.

4 Come conservare i Breathe Right Cerottini Nasali?

• ³⁰ Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

• Conservare nella confezione originale.

Nel rispetto dell'ambiente, smaltire secondo i requisiti locali.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

5 Ulteriori informazioni

I cerottini nasali sono confezionati singolarmente in involucri sigillati a freddo con adesivo. Gli involucri sigillati a freddo sono confezioni in cartone di cartone.

Per ottenere un risultato ottimale con i cerottini balsamici

Breathe Right Cerottini Nasali con olii balsamici sono rivestiti da capsule che contengono mentolo, eucalipto e canfora. Per rilasciare gli aromi, grattare delicatamente il cerottino. Grattare ancora per rinfrescarlo di nuovo.

1 Qu'è-ce que Breathe Right Cerottini Nasali e dans quels cas l'utiliser ?

Breathe Right Bandelletes Nasales sont des bandelletes élastiques flexibles qui dégagent les voies nasales par soulèvement afin d'améliorer le passage de l'air.

Il est cliniquement prouvé que **Breathe Right Bandelletes Nasales** ouvre instantanément les voies nasales afin de mieux respirer.

Breathe Right Bandelletes Nasales peut être utilisé de jour ou de nuit pour soulager la congestion due aux allergies ou aux rhumes.

A utiliser si vous souffrez de :

• Congestion nasale

Breathe Right Bandelletes Nasales dégage le nez pour aider à mieux respirer en soulageant temporairement la congestion nasale qui peut être causée par les rhumes et allergies.

Breathe Right Bandelletes Nasales peut procurer un soulagement temporaire des symptômes de congestion ou de respiration difficile dus à une déviation de la cloison nasale. Ce produit ne doit pas être considéré comme une alternative à la correction chirurgicale définitive.

• Ronflement

En facilitant la respiration à travers le nez ou lieu de la bouche, **Breathe Right Bandelletes Nasales** peut aider à réduire ou même supprimer le ronflement. Pour de meilleurs résultats dans le soulagement du ronflement, il est recommandé de l'utiliser la nuit.

Breathe Right Bandelletes Nasales peut être utilisé avec d'autres médicaments.

2 Comment utiliser Breathe Right Bandelletes Nasales ?

Jetable - N'utilisez chaque bandelette qu'une seule fois. Pour usage unique seulement.

Peut être utilisé de jour comme de nuit.

Un utilisation correcte de la bandelette vous aidera à obtenir des performances optimales. Attention à ne pas placer le produit trop haut ou trop bas.

Il est nécessaire d'utiliser la taille de bandelette adéquate pour un meilleur résultat. Les bandelletes nasales de petite/moyenne taille conviennent à 75% des nez, les bandelletes de grande taille conviennent aux adultes ayant un nez plus large.

La bande spéciale "ressemblant à un ressort" ouvre délicatement les voies nasales.

Utiliser la version transparente de **Breathe Right Bandelletes Nasales** pour les yeux sensibles/sèches.

3 Pour votre sécurité

Mis en garde et précautions

• Pour usage externe uniquement.

• Ne pas placer sur les lésions cutanées, les coups de soleil ou les irritations.

• En cas d'éruption ou une irritation cutanée se produit, cesser l'utilisation.

• Ne pas utiliser plus de 12 heures par jour.

• Pour un meilleur résultat, les bandelletes nasales sont à usage unique seulement. Après retrait, la bandelette perd son côté collant et ne restera pas en place.

• **Tenir hors de la vue et la portée des enfants.**

• Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.

• En cas de doute sur l'utilisation du produit, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

NE PAS UTILISER

Si vous êtes allergique aux **Breathe Right Bandelletes Nasales**.

Attenzione: **Breathe Right Bandelletes Nasales** non è pas destiné à traiter l'apnée du sommeil. Il est recommandé aux personnes présentant une apnée du sommeil de consulter un médecin.

Certaines personnes peuvent présenter des effets indésirables lors de l'utilisation de **Breathe Right Bandelletes Nasales**. Cela peut être des réactions au site d'application (exemple : érythème, irritation, douleur, enflure, excoriation) et des réactions d'hypersensibilité pouvant inclure des éruptions cutanées, prurit et gonflement facial.

Tout incident sérieux survenant à l'occasion de l'utilisation de ce produit doit être communiqué au fabricant et à l'autorité nationale compétente de votre pays. Il est important de communiquer tout incident lié à ce produit car cela permet d'identifier des défauts de ce dispositif médical et permet de prévenir la survenue d'incidents similaires à nouveau.

4 Comment conserver Breathe Right Bandelletes Nasales

• ³⁰ Ne pas conserver au-dessus de 30°C.

• A conserver dans son étui d'origine.

• Veuillez éliminer le produit conformément à vos exigences locales et toujours tenir compte de l'environnement.

• Ne pas utiliser après la date limite indiquée.

5 Autres informations

Breathe Right Bandelletes Nasales sont conditionnées dans une boîte avec des emballages individuels et scellés avec un adhésif.



1 NETTOYER
Laver et sécher le peau du nez afin d'éliminer l'impureté et le sébum (pour les peaux grasses, utiliser une lotion astringente).



2 POSITIONNER
Enlever la doublure protectrice et placer la bandelette sur le nez.



3 APPLIQUER
Appuyer aux deux extrémités avec vos doigts et frotter délicatement pour bien fixer.



4 ENLEVER
Enlever votre **Breathe Right Bandelletes Nasales** lorsque vous retirez votre visage avec de l'eau chaude ou lorsque vous êtes sous la douche. Retirez toujours la bandelette lentement. Détachez les extrémités puis retirez doucement la bandelette de chaque côté afin de réduire le risque de réactions cutanées.

POUR LES BANDELETTE NASALES AU MENTHOL

Les bandelletes nasales **Breathe Right® MENTHOL** sont recouvertes de capsules contenant du menthol, de l'eucalyptus et du camphre. Grattez la surface de la bandelette pour libérer le parfum apaisant du menthol - grattez à nouveau pour le réactiver.

RESPIRARE BENE IN OGNI MOMENTO

Prima di utilizzare i Breathe Right® Cerottini Nasali leggere attentamente queste istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni chiedere al farmacista o al medico.

MIEUX RESPIRER, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de Breathe Right® Bandelettes Nasales. Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

JEDERZEIT UND ÜBERALL BESSER ATMEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Breathe Right® Nasenstrips anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Breathe Right®

CEROTTINI NASALI BANDELETTES NASALES NASENSTRIPS BESSER ATMEN

1 Was sind Breathe Right Nasenstrips und wofür werden sie angewendet?

Breathe Right Nasenstrips sind flexible, federartige Streifen, welche die Nasenflügel sanft anheben, damit mehr Luft durchströmen kann.

Es ist klinisch nachgewiesen, dass **Breathe Right Nasenstrips** sofort die Nasengänge weiten, damit Sie besser atmen können.

Breathe Right Nasenstrips können tagsüber oder nachts verwendet werden, um die Atmung z.B. bei Allergien oder Erkältungen zu erleichtern.

Anwendung bei:

• Verstopfter Nase

Breathe Right Nasenstrips öffnen die Nase und ermöglichen eine bessere Atmung, indem sie vorübergehend von verengter und verstopfter Nase befreien, die durch Erkältungen und Allergien verursacht werden kann.

Breathe Right Nasenstrips können vorübergehend die Symptome von verstopfter Nase oder von Atembeschwerden bei einer Nasenschleimhautverengung lindern. Sie sollten nicht als Alternative zur endgültigen chirurgischen Korrektur angesehen werden.

• Schnarchen

Breathe Right Nasenstrips erleichtern es, durch die Nase statt durch den Mund zu atmen und können so dazu beitragen, das Schnarchen zu lindern oder sogar zu beseitigen. Für optimale Hilfe gegen das Schnarchen, wird die nächtliche Anwendung empfohlen.

Breathe Right Nasenstrips können gemeinsam mit allen Arzneimitteln angewendet werden.

2 Wie sind Breathe Right Nasenstrips anzuwenden?

Einwegartikel – verwenden Sie jeden Strip nur einmal.

Kann tagsüber und nachts verwendet werden.

Eine korrekte Platzierung sorgt für optimale Ergebnisse.

Achten Sie darauf, dass Sie den Strip weder zu hoch noch zu niedrig anbringen.

Die Grösse ist wichtig. Verwenden Sie die richtige Grösse, um die beste Wirkung zu erzielen. Die Nasenstrips in normaler Grösse passen auf 75% aller Nasen, grosse Nasenstrips sind für Erwachsene mit einer grösseren Nase.

Der spezielle, federartige Streifen öffnet sanft die Nasenflügel.


Verwenden Sie bei trockener/empfindlicher Haut die transparente Variante.



3 Zu Ihrer Sicherheit

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

- Nur zur äusserlichen Anwendung.
- Nicht auf wunden, sonnenverbrannten oder gereizter Haut anwenden.
- Bei Ausschlag oder Hautreizung nicht weiter verwenden.
- Nicht länger als 12 Stunden pro Tag verwenden.
- Die Strips sind aus Gründen der Funktionalität nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach dem Entfernen entfernt der Kleber an Haftung und der Strip klebt nicht mehr richtig.
- **Ausserhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.**
- Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
- Bei Fragen zur Anwendung dieses Produktes fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

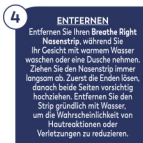

FÜR DIE MENTHOLHALTIGEN NASENSTRIPS

Breathe Right® MENTHOL Nasenstrips sind mit Kapseln beschichtet, die Menthol, Eukalyptus und Kampher enthalten. Durch Kratzen an der Oberfläche des Nasenstrips wird der beruhigende Mentholduft freigesetzt – durch erneutes Kratzen wird er wieder aktiviert.

4 Wie sind Breathe Right Nasenstrips aufzubewahren?

10-30°C Nicht über 30°C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren.

Bittensorgen Sie das Produkt gemäss Ihren lokalen Anforderungen und berücksichtigen Sie dabei immer die Umwelt. Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden, das auf der Verpackung angegeben wird.

5 Weitere Informationen

Die Nasenstrips sind einzeln in Papiersachets verpackt und mit Klebstoff kalt versiegelt. Die kalt versiegelten Papiersachets sind in Kartons verpackt.

I cerottini nasali **Breathe Right® MENTOLO** sono rivestiti con capsule che contengono un profumo a base di mentolo, eucalipto e canfora. I nasalestrips nasali **Breathe Right® MENTHOL** son ricoverti de capsule conteno un parfum de menthol, de eucalypto et de camphre. **Breathe Right® MENTHOL Nasenstrips** sind mit Kapseln beschichtet, die einen Menthol, Eukalyptus und Kampher Duft enthalten.



Attenzione: prima di usare il prodotto leggere le istruzioni d'uso incluse.
Attention : avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement la notice contenue dans cet étui.
Vorsicht: Vor der Anwendung die enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.



Non usare se la confezione è rotta o danneggiata.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Nicht verwenden, wenn die Umverpackung beschädigt ist.



Monouso. I cerottini nasali sono monouso.
Usage unique : les bandelettes nasales sont à usage unique.
Einmalanwendung: Nasenstrips zum einmaligen Gebrauch.



Lotto: vedere cartone.
Numéro de lot : voir étui.
Chargennummer: siehe Kartons.



Data di scadenza espressa in AAAA-MM
Date limite au format AAAA-MM
Verfallsdatum im Format JJJJ-MM angegeben



Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.



MDSS GmbH, Schiffbruggen 41, Hannover 30175, Germany.



MDSS CH GmbH, Laurenzenvorstadt 61, 5000 Aarau, Switzerland.



CH-IMPORTER: F. Uhlmann-Eyrout SA, Atterliergasse 1, 5600 Lenzburg, Switzerland.



DMV Austria GmbH, Gewerbestraße Süd 6, 5141 Moosdorf, Österreich.

www.breatheright.com



Dispositivo Medico / Dispositif médical / Medizinprodukt
Data/Dateum/Date : 03/2026

Trademarks owned by FCB. © 2026 FCB.



031726

3105854